

Instrucciones para recolección de saliva

Completa el pedido con tu información legal. En este caso, no podemos aceptar nombres de preferencia.

Nota: El nombre y apellido legal, así como la fecha de nacimiento en el pedido deben coincidir con la etiqueta de la muestra.

Sigue las instrucciones o no podremos procesar las muestras.



1 Antes de recolectar tu muestra, **NO** comas, bebas, mastiques chicle, fumes ni vapores durante 30 minutos.

- Completa el pedido de laboratorio en su totalidad con tu información legal.




2 Sacar el paquete de la bolsa y ábrelo retirando el papel. En el interior verás dos piezas: una cápsula con líquido azul y un recipiente con un embudo en la parte superior.



3 Mantén la saliva en tu boca sin tragar; luego escupe suavemente la saliva en el recipiente del embudo.



4 Tienes que llenar el recipiente con suficiente saliva hasta llegar a la línea negra que dice "escupir hasta aquí". Las burbujas en la saliva no cuentan para la cantidad total. Asegúrate de que la saliva llegue a la línea negra y que las burbujas permanezcan por encima de la línea. Esto puede tomar varios minutos, así que continúa haciéndolo por un tiempo.

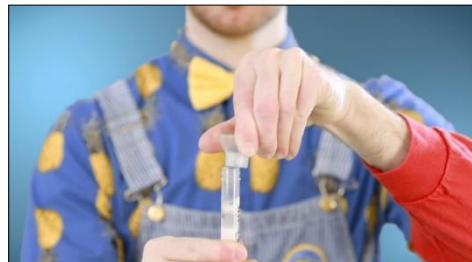

5 Una vez que hayas recolectado suficiente saliva, gira el embudo y tíralo a la basura.



6 Coloca la cápsula con el líquido azul encima del recipiente. Asegúrate de que la cápsula está bien colocada y gírala hasta que escuches un "clic" y el líquido azul se mezcle en el recipiente. Pide a tus padres o a un adulto que te ayude con este paso.



7 Agita suavemente el recipiente de 3 a 5 veces para mezclar todo.



8 Completa la etiqueta con tu nombre y apellido y la fecha de nacimiento y pégala a lo largo en el recipiente de muestra de saliva.



9 Coloca tu muestra de saliva etiquetada en la bolsa en la que vino. Coloca tu pedido completo en el bolsillo exterior de la bolsa.

Deja la muestra de saliva en el lugar correspondiente dentro de las 24 horas de recolección. Se puede almacenar a temperatura ambiente, sin necesidad de refrigerar.



Para obtener más información y consejos divertidos para niños pequeños, escanee el código QR para ver nuestro video de saliva o

visite: <https://youtu.be/Ru-vFZdImes>

Cómo escanear: ABRIR la cámara de su teléfono, APUNTAR al código, TOCAR el banner que aparece.

SickKids[®]